

**CONSIGNES D'URGENCE
ALARME DE LA PIECE
DES CONGELATEURS RECHERCHE**


(2^{ème} SOUS-SOL)

Consignes PC incendie

Code entrée : C1245Y

**EN CAS D'ALARME GENERALE
DE LA PIECE DES CONGELATEURS
DECLENCHEE EN PLEINE NUIT**

**L'ALARME DE LA CLIMATISATION (température)
SE DECLENCHE**

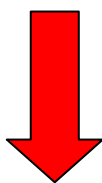

LES SERVICES TECHNIQUES APPELLENT

Code entrée : C1245Y

**EN CAS D'ALARME D'UN CONGELATEUR PARTICULIER
DECLENCHEE EN PLEINE NUIT**



**ON APPELLE LA PERSONNE RESPONSABLE DU
CONGELATEUR**

(Dans l'ordre : 1, 2, 3)

Appartenance des congélateurs

- **Alarme 2** : Peter Dorfmueller
- **Alarme 4** : Saadia Edhaibi
- **Alarme 5** : Saadia Edhaibi
- **Alarme 6** : Catherine Rucker-Martin
- **Alarme 7** : Frédéric Perros
- **Alarme 8** : Sylvia Cohen-Kaminsky
- **Alarme 10** : Michèle German-Fattal :

Consignes Unité INSERM

CONSIGNES D'URGENCE

LORS D'UNE ALARME DE CONGELATEUR DECLENCHEE EN PLEINE NUIT

A SAVOIR :

- **SEUL**, IL N'EST PAS POSSIBLE DE TRANSFERER LE CONTENU D'UN CONGELATEUR EN PANNE DANS UN AUTRE CONGELATEUR SANS PRENDRE DE RISQUE
- NE PAS OUVRIR LA PORTE DU CONGELATEUR AFIN DE PRESERVER LE FROID

Lorsque le PC incendie vous appelle pour vous signaler que votre congélateur est en alarme :

- 1- Demander à la personne du PC incendie ou à la personne du service technique qui est de garde s'il lui est possible de descendre au 2^{ème} sous-sol pour voir :

- à quelle température est la pièce
- à quelle température est le congélateur
- quels sont les voyants allumés.

En cas de refus, demandez à ce que le responsable technique de garde soit prévenu. Ces personnes vous aideront à faire un diagnostic et vous pourrez déjà avoir une idée de la gravité de la panne

- 2- Si la panne ne vous paraît pas grave et semble due aux conditions de température de la pièce :

- demander à ce que la porte à code soit ouverte et qu'un climatiseur portable soit installé au fond de la pièce

- demander si vous pouvez le rappeler 1h plus tard pour vérifier si l'alarme est toujours active. Souvent le congélateur redescend en température de lui-même.

- 3- Si le congélateur est toujours en alarme 1h plus tard ou si la panne vous paraît grave (panne des compresseurs)

- si la température du congélateur descend très vite et qu'il y a nécessité de transfert immédiat, prévenir les collègues pour que plusieurs personnes vous aident à effectuer le transfert du contenu le plus rapidement possible dans les congélateurs voisins en fonction de la place disponible.
- si la température du congélateur descend très peu et que le transfert peut attendre, prévenir les collègues pour que plusieurs personnes soient là le lendemain matin à la première heure pour effectuer un transfert du contenu le plus rapidement possible dans les congélateurs voisins en fonction de la place disponible et dans l'attente d'un congélateur de délestage.